



IODIM[®]

Gotas oculares estériles

Frasco de vidrio color ámbar de 10 ml con cuentagotas y tapón con rosca

INSTRUCCIONES DE USO

COMPOSICIÓN

Triglicéridos de cadena media (MCT), hialuronato sódico, glicerol, vitamina E TP GS, citrato de potasio tribásico, cloruro sódico, ácido cítrico monohidrato, povidona iodada 0,6%, agua purificada.

ENVASE

IODIM[®] Frasco de vidrio color ámbar de 10 ml con cuentagotas y tapón de rosca, con gotas oculares estériles, presentado en caja de cartón.

CARACTERÍSTICAS Y MECANISMO DE ACCIÓN

IODIM[®] es una solución oftálmica, estéril isotónica, de base lipídica gracias a la presencia de Triglicéridos de cadena media (MCT). Están también presentes el Hialuronato sódico (polímero hidrófilo), el Glicerol (humectante), la Vitamina E TP GS, las Sales Minerales y la Povidona iodada (conservante).

IODIM[®] contiene los MCT, que interactúan con el estrato lipídico externo de la película lagrimal y forman una película protectora que obstaculiza la hiperevaporación del componente acuoso de la lágrima; contiene hialuronato sódico, que interactúa mecánicamente con el estrato mucínico de la película lagrimal, retiene el agua y contribuye a mantener la superficie ocular estable por un largo periodo. Son suficientes 2 instilaciones al día para dar una sensación de alivio y para mejorar la condición de la superficie ocular. **IODIM[®]** contiene también glicerol que tiene una acción humectante, sales minerales (sodio, potasio, cloruro y citrato) que tienen una función nutritiva en la superficie ocular además de la función de regulación del pH y de la osmolaridad lagrimal, la Vitamina E TP GS favorece la humectabilidad de la superficie ocular y la Povidona iodada que garantiza la esterilidad de la solución antes y después de la apertura del frasco.

INDICACIONES

IODIM[®] estabiliza la película lagrimal y protege la superficie ocular en todos los casos de disfunción de la película lagrimal, presentes también en pacientes sujetos a infecciones oculares recurrentes.

POSOLOGÍA Y MODO DE USO

- Eliminar el precinto de seguridad de plástico colocado en el cuello del frasco (**Figura 1**).
- Desenroscar el tapón (**Figura 2**).
- Inclinar la cabeza ligeramente hacia atrás y bajar el párpado inferior con el dedo índice, para crear una pequeña bolsa. Mantener el cuentagotas en posición vertical con la punta mirando hacia abajo sobre el ojo (**Figura 3**).
- Mirar hacia arriba e instilar 1 o 2 gotas en el ojo apretando ligeramente el cuentagotas (**Figura 4**), 1-2 veces al día, según le haya indicado su especialista, posteriormente cerrar los párpados delicadamente por unos instantes, para que la solución pueda distribuirse por la superficie ocular.



Figura 1

Extraer el frasco de la caja y eliminar el precinto de seguridad de plástico colocado en el cuello del frasco.



Figura 2

Desenroscar el tapón.



Figura 3

Inclinar la cabeza ligeramente hacia atrás y bajar el párpado inferior con el dedo índice, para crear una pequeña bolsa. Mantener el cuentagotas en posición vertical con la punta mirando hacia abajo, sobre el ojo.



Figura 4

Mirar hacia arriba e instilar 1 o 2 gotas en el ojo apretando ligeramente el cuentagotas.


CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD

- No utilizar el producto después de la fecha de caducidad indicada en la caja. Dicho periodo se refiere al producto conservado en la nevera a temperatura refrigerada (2°C - 8°C).
- Mantener el producto en lugar oscuro, conservando el frasco en la caja de cartón.
- El producto puede ser utilizado en los 28 días siguientes a la apertura, por lo tanto, después de dicho periodo, el producto no utilizado debe ser desechado.

PRECAUCIONES/ADVERTENCIAS

- Lavar / desinfectar las manos antes de utilizar.
- El producto está destinado únicamente al uso oftálmico externo. No tragar.
- El producto es para uso individual.
- No utilizar el producto si, en el momento de la primera apertura, el envase resulta dañado o no está perfectamente cerrado.
- Conservar fuera del alcance de los niños.
- No utilizar en caso de hipersensibilidad específica a uno de los componentes del producto.
- No ingerir la solución.
- Para evitar cualquier contaminación, no tocar con el cuentagotas ninguna superficie y evitar el contacto directo con el ojo.
- En caso de efectos no deseados, interrumpa el tratamiento y consulte con su oftalmólogo.
- Esperar al menos 15 minutos antes de instilar cualquier otro producto oftálmico ya que se podrían alterar sus efectos.
- No usar el producto después de la fecha de caducidad indicada en la caja.
- No usar con lentes de contacto puestas.
- Cerrar bien el frasco inmediatamente después de su uso.
- La fecha de caducidad se refiere al producto íntegro y correctamente conservado.
- Uso en adultos.
- Después de la instilación del producto **IODIM®** se puede producir una sensación de ardor u hormigueo transitorios.

Fecha de la última revisión del texto: Marzo 2017.

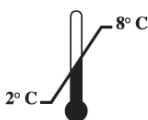

NOT32104V01

AF-P/00